

特定保険医療材料副木対象品



骨折部位を固定する目的で使用した場合、材料価格を請求できます！

056 副木	①手指・足指用	②上肢用	③下肢用	④鼻骨用	【厚生労働省告示第58号】 2022年3月4日官報 別表 I 診療報酬の算定方法別 表第一医科診療報酬点数表 (以下「医科点数表」という。) の第2章第2部に規定する 特定保険医療材料及びその 材料価格
(1) 軟化成形使用型 償還価格 機能区分コード 略称	1,380円 B002 056 01 01 副木・F10-a-1	1,770円 B002 056 01 02 副木・F10-a-2	4,700円 B002 056 01 03 副木・F10-a-3	1,030円 B002 056 01 04 副木・F10-a-4	
(2) 形状賦形型 償還価格 機能区分コード 略称	118円 B002 056 02 01 副木・F10-b-1	410円 B002 056 02 02 副木・F10-b-2	648円 B002 056 02 03 副木・F10-b-3	—	

軟化成形使用型副木 熱可塑性プラスチックシートの固定用シーネ


ソフラフィックス® サーマ

■ 一般医療機器（特定保守管理対象外）

- 成形型副木（JMDNコード 36204000）
- 届出番号：13B2X10294000007
- 届出販売名：ソフラフィックスサーモ
- 製造販売元：華琳株式会社

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
030161	210mm×300mm 厚さ 1.6mm	1枚	10,230円(税込)	4958995301618
030162	210mm×300mm 厚さ 2.4mm		9,300円(税別)	4958995301625

使用例



形状賦形型副木 ソフトウレタンで包んだ軟触性保護材つき固定用シーネ

ソフラットシーネ® II

■ 一般医療機器（特定保守管理対象外）

- 単回使用パッド入り副木（JMDNコード 35357000）
- 届出番号：14B3X10016000010
- 届出販売名：ソフラットシーネ II
- 製造販売元：株式会社竹虎

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
032040	3S 長さ 220mm×幅 45mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚	オープン価格	4958995320404
032041	SS 長さ 320mm×幅 45mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚		4958995320411
032052	SX 長さ 420mm×幅 55mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚		4958995320527
032042	S 長さ 520mm×幅 70mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚		4958995320428
032043	M 長さ 620mm×幅 80mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚		4958995320435
032053	MX 長さ 720mm×幅 90mm×厚さ 20mm 上肢用	1枚		4958995320534
032044	L 長さ 820mm×幅 100mm×厚さ 25mm 下肢用	1枚		4958995320442
032054	LX 長さ 920mm×幅 110mm×厚さ 25mm 下肢用	1枚		4958995320541
032045	LL 長さ 1030mm×幅 120mm×厚さ 30mm 下肢用	1枚		4958995320459

使用例（包帯は別売です）



肌に当たる部分に**ドライシート**を使用しています。

吸収性・拡散性・速乾性に優れ「表面はサラッとした感触、内側で吸収・拡散・速乾」性能を発揮します。

断面拡大写真

ドライシート生地 ナイロン100%

形状賦形型副木 アルミ芯材の保護材つき固定用シーネ

カルメイク® II

■ 一般医療機器（特定保守管理対象外）

- 単回使用パッド入り副木（JMDNコード 35357000）
- 届出番号：14B3X10016000011
- 届出販売名：カルメイク II
- 製造販売元：株式会社竹虎

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
032221	1号 アルミ材厚さ 1.5mm×幅 13mm×長さ 200mm 24本入 手指・足指用	1箱	オープン価格	4958995322217
032222	2号 アルミ材厚さ 1.5mm×幅 18mm×長さ 400mm 12本入 手指・足指用	1箱		4958995322224
032223	3号 アルミ材厚さ 1.5mm×幅 25mm×長さ 400mm 12本入 上肢用	1箱		4958995322231
032224	4号 アルミ材厚さ 1.5mm×幅 50mm×長さ 400mm 6本入 上肢用	1箱		4958995322248


使用例（テープ、包帯は別売です）



ソフラフィックス®サーモ

巻きやすく、高い固定力のある固定用熱可塑性シーネ

- 65°C以上に温めると柔らかくなり、加工がしやすく、形状修正も可能
- 常温になると元の硬さに戻り、部位に沿った細やかな固定が可能
- 非粘着でべとつかず、2倍以上の伸び率があるので巻きやすい

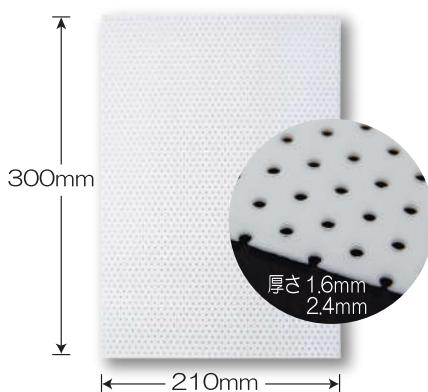


個包装




詳細はこちら

使用方法


※表裏はありません

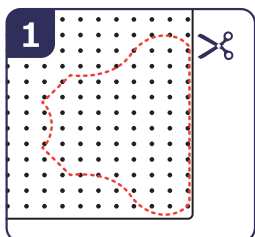

ソフラフィックスサーモを固定部位に合わせてカットします。

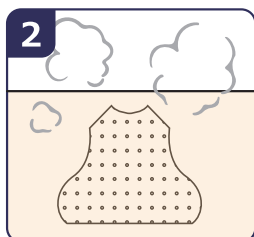

お湯やホットプレートで65°C以上に加熱すると、1~4分程度で透明になり軟化します。

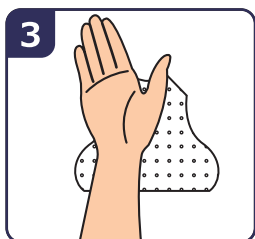

表面を少し冷やしてから固定部位にあてて、必要な形状に成形してください。



成形後、完全に硬化(8分を目安)させてください。
※3回程度であれば、形状修正可能

ケース単位: 5枚

商品番号	規格	販売単位	定価	JANCODE
030161	210mm×300mm 厚さ1.6mm	1枚	10,230円(税込)	4958995301618
030162	210mm×300mm 厚さ2.4mm	1枚	9,300円(税別)	4958995301625

骨折部位を固定する目的で使用した場合、下記の材料価格を請求できます!

056 副木(1) 軟化成形使用型	償還価格
①手指・足指用	1,380円
②上肢用	1,770円
③下肢用	4,700円
④鼻骨用	1,030円

※2022年4月現在の厚生労働省告示内容



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター8F
TEL. 045(680)0308(代) FAX. 045(680)0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06(6386)7217(代) FAX. 06(7175)7101

取扱店