ワンタッチ顎バンド

ソフラ® あごバンデージⅢ

Taketora®

あごの術後をやさしく守る
術後の圧迫固定に

- 肌ざわりのよいやさしい生地
- 面ファスナーで調整が自在
- 2点留めでかんたん装着

▲商品詳細はこちら



グレー

伸縮性のある生地で頬の固定がしやすい

面ファスナー2点留め





（肌側）

耳にかからないように大きく開けたデザイン

あごにかかりやすいように立体的に縫製

縫い目を外側にし肌への負担を軽減

コンパクトなパッケージ
・取扱説明書同梱



規　格

定価：5,280 円（税込） 4,800 円（税抜）

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
007413	グレー　M	1枚	4958995074130	10 枚
007414	グレー　L	1枚	4958995074147	10 枚


素　材

複合繊維（ポリエステル） 66%・ポリエステル34%


一部植物由来の原料を使用したやわらかなポリエステル繊維


サイズの選び方

サイズ	顔廻り	首廻り
M	56cm～67cm	30cm～40cm
L	62cm～76cm	35cm～45cm

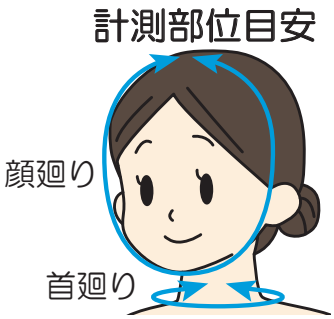

装着方法

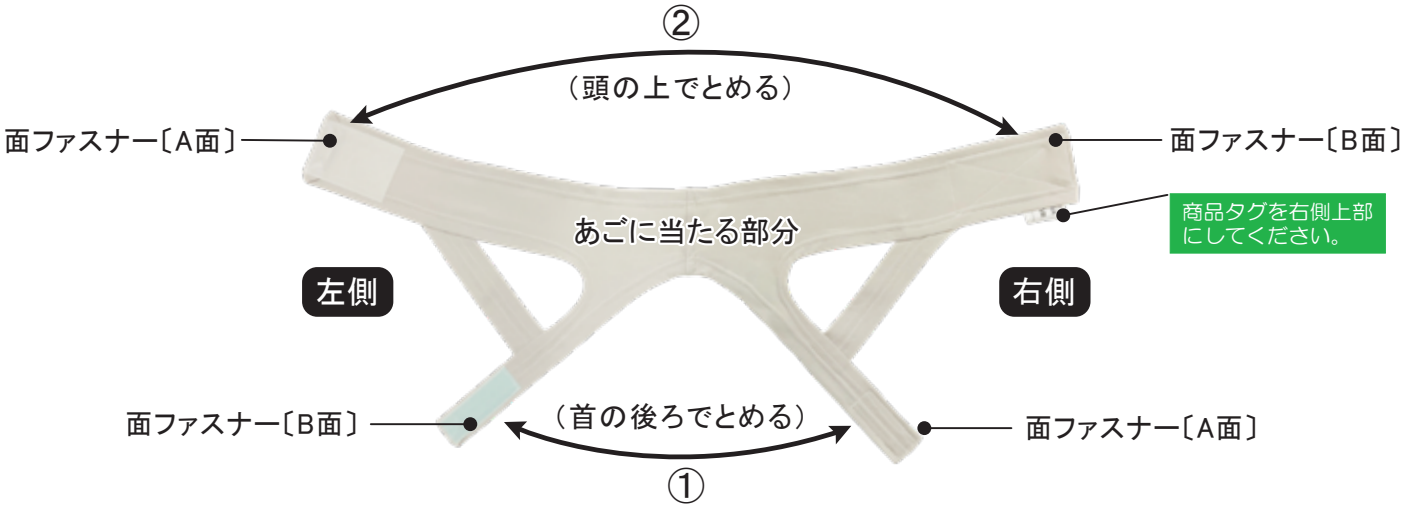

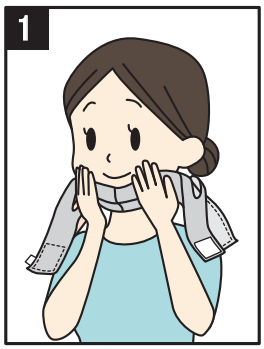


あごに当たる部分をあごに当て、装着位置を確認します。



①の面ファスナーの両端を持ち、首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。
（左手側の面ファスナーB面が上になります）



②の面ファスナーの両端を持ち、あごにフィットするように頭の上でとめます。
（左手側の面ファスナーA面が上になります）

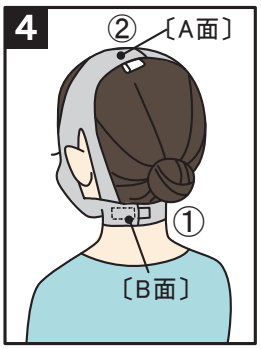

＊後ろから見た図
固定力を微調整してください。

株式会社竹虎®

https://www.taketora-web.com/

【ウェルネス事業部】
〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045(680)0340　FAX. 045(680)0343

取扱店