弾性サポートバンド（圧迫バンド）

ソフラウルファー® ロング

Taketora®

応急処置などに
簡単に巻けてくり返し使える







幅 8cm× 長さ 200cm

外側全面が面ファスナー接着可

圧迫・固定をサポート



適度な伸縮性で

圧迫力を自由に調整



面ファスナーで
くり返し留めることができ

簡単に装着可能




200cm のロングバンドで
自由な位置に接着できるため

幅広い部位に対応

●装着方法　※本品は左右兼用です。




※印字がある方を肌側にして
ご使用ください。

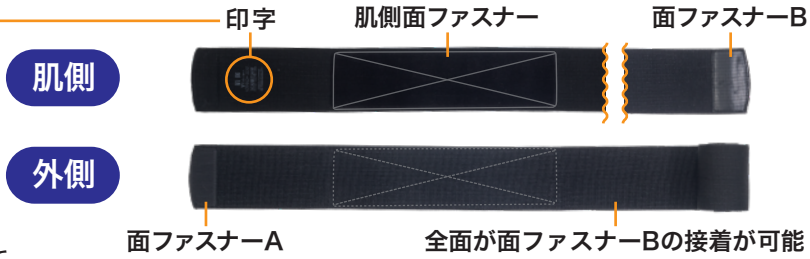

▲装着動画

●例）ふくらはぎ（左足）



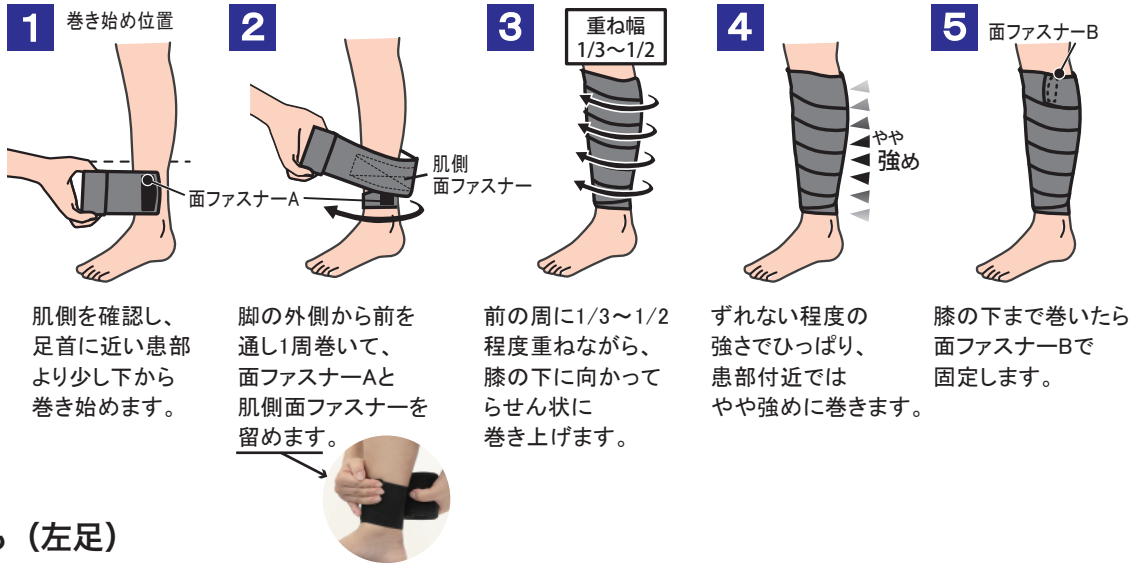

肌側を確認し、足首に近い患部より少し下から巻き始めます。

脚の外側から前を通し1周巻いて、面ファスナーAと肌側面ファスナーを留めます。


前の周に1/3〜1/2程度重ねながら、膝の下に向かってらせん状に巻き上げます。

ずれない程度の強さでひっぱり、患部付近ではやや強めに巻きます。

膝の下まで巻いたら面ファスナーBで固定します。

●例）ふともも（左足）



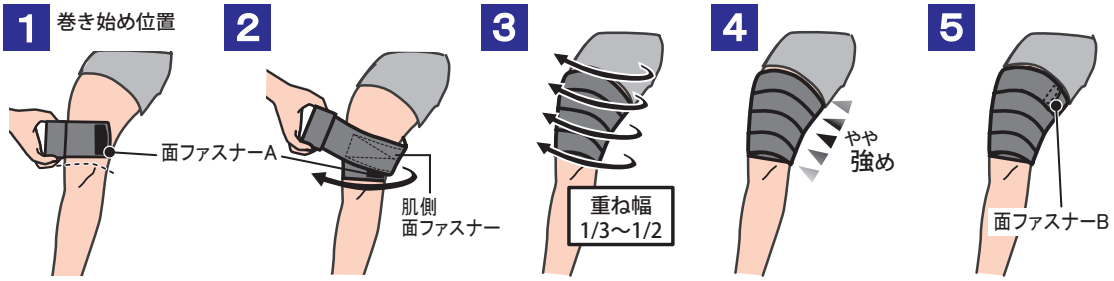

肌側を確認し、膝の少し上から巻き始めます。

脚の外側から前を通し1周巻いて、面ファスナーAと肌側面ファスナーを留めます。

前の周に1/3〜1/2程度重ねながら、膝側から脚の付け根に向かってらせん状に巻き上げます。

ずれない程度の強さでひっぱり、患部付近ではやや強めに巻きます。

ふとももの付け根まで巻いたら面ファスナーBで固定します。

●素材

ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

2,200円（税込）2,000円（税別）

商品番号	規　格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037790	8cm×200cm	1枚	4958995377903	6枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位です



1枚入　　6枚入

株式会社竹虎®
https://www.taketora-web.com/
【メディカル事業部】
東日本　〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045（680）0308（代）　FAX. 045（680）0312
西日本　〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06（6386）7217（代）　FAX. 06（7175）7101

取扱店